



90 %
MENOS
ACUMULACIÓN
DE TROMBOS

EN COMPARACIÓN
CON LOS CATÉTERES
SIN REVESTIMIENTO
(según la cifra de trombocitos)*




Catéter de hemodiálisis DuraMax™

Se ha demostrado que reduce la acumulación de trombos *in vitro*[†]

El catéter BioFlo DuraMax™ es el primer catéter de diálisis con tecnología Endexo®, que proporciona un material de catéter más resistente a la acumulación de trombos *in vitro* que los catéteres de uso común (según la cifra de trombocitos).[†]

El catéter BioFlo DuraMax proporciona acceso a largo plazo al sistema venoso periférico para las sesiones de hemodiálisis. El catéter BioFlo DuraMax incorpora tecnología Endexo, que está presente en todo el cuerpo del catéter, incluidas las superficies intraluminal y extraluminal del catéter.

- El catéter de diálisis BioFlo DuraMax presenta un 84 % menos de acumulación de trombos *in vitro* en su superficie que los catéteres de diálisis crónica Palindrome sin revestimiento (según la cifra de trombocitos).[†]

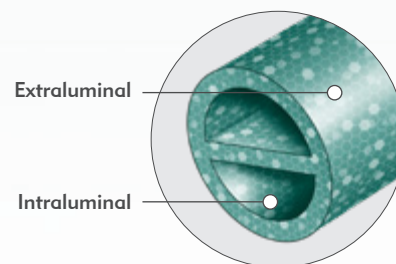

Extraluminal

Intraluminal

Catéter BioFlo DuraMax con tecnología Endexo

83,5 %

MENOS ACUMULACIÓN DE TROMBOS

En comparación con el catéter de diálisis crónica Palindrome H (según la cifra de trombocitos)[†]

Catéter BioFlo DuraMax con tecnología Endexo



El catéter tiene un trombo, una vaina de fibrina o un coágulo visibles mínimos.

Imagen de SEM (microscopia electrónica de barrido)

Catéter de diálisis BioFlo DuraMax con tecnología Endexo a 10 aumentos




Catéter de diálisis crónica Palindrome™ H



Imagen de SEM (microscopia electrónica de barrido)

Catéter de diálisis crónica Palindrome H a 10 aumentos

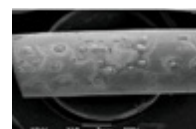

[†]La reducción de la acumulación de trombos (según la cifra de trombocitos) está respaldada por pruebas de laboratorio *in vitro* agudas realizadas durante periodos de hasta dos horas con sangre bovina. Las evaluaciones preclínicas *in vitro* no necesariamente predicen el funcionamiento clínico con respecto a la formación de trombos. Datos en archivo.

Catéter BioFlo DuraMax

Las conexiones luer de poliuretano termoplástico combinan dureza, estabilidad dimensional y resistencia química

Curved Tip Catheter
TECHNOLOGY

La tecnología de catéter de punta curvada reduce la yuxtaposición a la pared de la vena y el riesgo de insuficiencia arterial. El escalonado de 3 cm de la punta reduce las tasas de recirculación

Catéter BioFlo DuraMax de 15,5 Fr facilita altos caudales a bajas presiones arteriales. Luz patentada, diseño resistente al acodamiento

Tubos alargadores transparentes para la visualización temprana del retorno sanguíneo

El diseño patentado de luz de la guía y punta venosa anguladas coloca la guía en el centro del borde delantero de la punta distal y proporciona rendimiento sobre la guía y facilidad de inserción

Catéter BioFlo DuraMax

Las características avanzadas, como los diámetros de luz grandes y la tecnología Endexo de reducción de los trombos, permiten al catéter BioFlo DuraMax administrar altos caudales a bajas presiones.

CATÉTER BIOFLO
DURAMAX

30,3 %

**REDUCCIÓN DE
LA PRESIÓN**

En comparación con el
catéter para diálisis
crónica Palindrome™

Ofertas competitivas de kits para atención al paciente

Los catéteres BioFlo DuraMax se comercializan en diversas opciones para ofrecer una inserción segura y fiable.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Número de catálogo	Longitud del catéter	De la punta al manguito
--------------------	----------------------	-------------------------

KIT BÁSICO DE DOS VÁLVULAS

H965103028011†	20 cm	15 cm
H965103028021	22 cm	17 cm
H965103028031	24 cm	19 cm
H965103028041	28 cm	23 cm
H965103028051	32 cm	27 cm
H965103028061	36 cm	31 cm
H965103028070*	40 cm	35 cm
H965103028080*	48 cm	43 cm
H965103028090*	55 cm	50 cm


VASCPAK DE DOS VÁLVULAS

H965103028161†	20 cm	15 cm
H965103028171†	22 cm	17 cm
H965103028181	24 cm	19 cm
H965103028191	28 cm	23 cm
H965103028201	32 cm	27 cm
H965103028211	36 cm	31 cm
H965103028220*	40 cm	35 cm
H965103028230*	48 cm	43 cm
H965103028240*	55 cm	50 cm

BÁSICO DE UNA VÁLVULA

H965103038011†	20 cm	15 cm
H965103038021	22 cm	17 cm
H965103038031	24 cm	19 cm
H965103038041	28 cm	23 cm
H965103038051	32 cm	27 cm
H965103038061	36 cm	31 cm
H965103038070*	40 cm	35 cm
H965103038080*	48 cm	43 cm
H965103038090*	55 cm	50 cm

Medida de la longitud del catéter (no dibujada a escala)

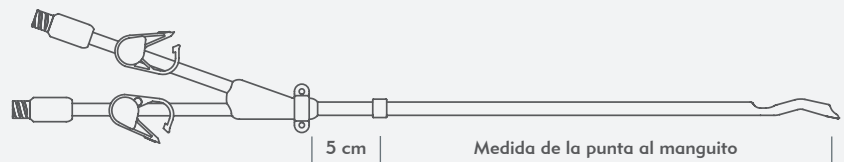

Número de catálogo	Longitud del catéter	De la punta al manguito
--------------------	----------------------	-------------------------

VASCPAK DE UNA VÁLVULA

H965103038161†	20 cm	15 cm
H965103038171†	22 cm	17 cm
H965103038181	24 cm	19 cm
H965103038191	28 cm	23 cm
H965103038201	32 cm	27 cm
H965103038211	36 cm	31 cm
H965103038220*	40 cm	35 cm
H965103038230*	48 cm	43 cm
H965103038240*	55 cm	50 cm

CATÉTER SOLAMENTE

H965103029011†	20 cm	15 cm
H965103029021†	22 cm	17 cm
H965103029031	24 cm	19 cm
H965103029041	28 cm	23 cm
H965103029051	32 cm	27 cm
H965103029061†	36 cm	31 cm
H965103029071†	40 cm	35 cm
H965103029081†	48 cm	43 cm
H965103029091†	55 cm	50 cm

†Este artículo se fabrica bajo pedido | Envase de 1 unidad por caja.

5 unidades por caja de transporte. | *1 unidad por caja de transporte.

LAS CONFIGURACIONES DE LOS KITS INCLUYEN:

KIT BÁSICO

- 1-Catéter de hemodiálisis BioFlo DuraMax
- 2-Conectores de inyección
- 1-Apósito adhesivo
- 1-Vaina introductora desprendible con válvula de 16 Fr
- 1-Dilatador vascular de 12 Fr
- 1-Dilatador vascular de 14 Fr
- 1-Tunelizador Tri-Ball con manguito
- 1-Guía J/flexible de 0.038" (0.97 mm)
- 1-Aguja introductora de 18 G x 70 mm
- 1-Bisturí de seguridad del n.º 11.

KIT VASCPAK™

- 1-Catéter de hemodiálisis BioFlo DuraMax
- 2-Conectores de inyección
- 1-Apósito adhesivo
- 1-Vaina introductora desprendible con válvula de 16 Fr
- 1-Dilatador vascular de 12 Fr
- 1-Dilatador vascular de 14 Fr
- 1-Tunelizador Tri-Ball con manguito.

KIT DE CATÉTER SOLAMENTE

- 1-Catéter de hemodiálisis BioFlo DuraMax
- 2-Conectores de inyección.

Consulte a su representante de Merit Medical sobre la disponibilidad de productos específicos del país.

Antes de su utilización, consulte las instrucciones de uso para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y el modo de empleo.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle
East & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733