



90 %

**WENIGER THROM-
BUSANSAMMLUNG**

VERGlichen MIT
UNBESCHICHTETEN
KATHETERN
(basierend auf der
Thrombozytenzahl)*




DuraMax™ Hämodialysekatheter

Reduziert nachweislich die Thrombusansammlung in vitro[†]

Der BioFlo DuraMax™ Katheter ist der erste Dialysekatheter mit Endexo® Technologie und weist ein Kathetermaterial auf, das im Vergleich zu häufig verwendeten Kathetern (basierend auf der Thrombozytenzahl) resistenter gegen eine In-vitro-Thrombusansammlung ist.[†]

Der BioFlo DuraMax Katheter bietet einen Langzeit-Zugang zum peripheren Venensystem für Hämodialysesitzungen. Der BioFlo DuraMax Katheter verfügt über die Endexo Technologie, die sich über den gesamten Katheterkorpus, einschließlich der intraluminalen und extraluminalen Oberfläche des Katheters, erstreckt.

- Der BioFlo DuraMax Dialysekatheter weist auf seiner Oberfläche eine 84 % geringere In-vitro-Thrombusansammlung auf als unbeschichtete Palindrome Katheter für die chronische Dialyse (basierend auf der Thrombozytenzahl).[†]

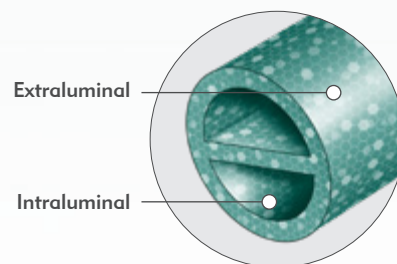

BioFlo DuraMax Katheter mit Endexo Technologie



Der Katheter weist einen minimal sichtbaren Thrombus, eine Fibrinhülle oder ein Gerinnsel auf.

REM-Bild (Rasterelektronenmikroskopie)

BioFlo DuraMax Dialysekatheter mit Endexo Technologie in 10-facher Vergrößerung




Palindrome™ H Katheter für die chronische Dialyse



REM-Bild (Rasterelektronenmikroskopie)

Palindrome H Katheter für die chronische Dialyse in 10-facher Vergrößerung

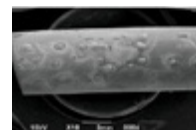

BioFlo DuraMax Katheter
mit Endexo Technologie

83,5 %

**WENIGER THROM-
BUSANSAMMLUNG**

Verglichen mit dem Palindrome H
Katheter für die chronische Dialyse
(basierend auf der Thrombozytenzahl)[†]

[†]Die Reduzierung der Thrombusansammlung (basierend auf der Thrombozytenzahl) wird durch akute In-vitro-Labortests untermauert, die bis zu zwei Stunden lang mit Rinderblut durchgeführt wurden. Präklinische In-vitro-Evaluierungen geben nicht unbedingt Aufschluss über die klinische Leistung hinsichtlich der Thrombusbildung. Daten liegen vor.

BioFlo DuraMax Katheter

Die Luer-Anschlüsse aus thermoplastischem Polyurethan vereinen Robustheit, dimensionale Stabilität und Beständigkeit gegen Chemikalien.

Curved Tip Catheter

TECHNOLOGY

Die Kathetertechnologie mit gebogener Spitze (Curved Tip Catheter Technology) reduziert die Apposition an der Venenwand und das Risiko einer arteriellen Insuffizienz. Die Abstufung der Spitze von 3 cm reduziert die Rezirkulationsraten.

BioFlo DuraMax Katheter, 15,5 F ermöglicht hohe Flussraten bei mäßigem arteriellem Druck. Firmeneigenes Lumen, knickresistentes Design.

Transparente Verlängerungsleitungen für eine frühzeitige Visualisierung des Blutrückflusses

Das patentierte Design mit abgewinkelter Venenspitze und Führungsdrahtlumen bringt den Führungsdraht in die Mitte der Vorderkante der distalen Spitze und bietet „Over-the-Wire“-Leistung und einfache Einführung.

BioFlo DuraMax Katheter

Dank fortschrittlicher Merkmale, wie z. B. Lumina mit großem Durchmesser und Endexo Technologie zur Thrombusreduzierung, kann der BioFlo DuraMax Katheter hohe Flussraten bei geringem Druck liefern.

BIOFLO DURAMAX
KATHETER

30,3 %

DRUCKREDUZIERUNG

Verglichen mit dem
Palindrome™ Katheter für
die chronische Dialyse

Angebote von Mitbewerber-Kits für die Patientenversorgung

BioFlo DuraMax Katheter sind für eine sichere und zuverlässige Einführung in einer Vielzahl von Optionen erhältlich.

BESTELLINFORMATIONEN

Katalognummer	Kathe- terlänge	Spitze bis Man- schette
---------------	--------------------	----------------------------------

BASIS-KIT MIT DOPPELVENTIL

H965103028011†	20 cm	15 cm
H965103028021	22 cm	17 cm
H965103028031	24 cm	19 cm
H965103028041	28 cm	23 cm
H965103028051	32 cm	27 cm
H965103028061	36 cm	31 cm
H965103028070*	40 cm	35 cm
H965103028080*	48 cm	43 cm
H965103028090*	55 cm	50 cm


VASCPAK DOPPELVENTIL

H965103028161†	20 cm	15 cm
H965103028171†	22 cm	17 cm
H965103028181	24 cm	19 cm
H965103028191	28 cm	23 cm
H965103028201	32 cm	27 cm
H965103028211	36 cm	31 cm
H965103028220*	40 cm	35 cm
H965103028230*	48 cm	43 cm
H965103028240*	55 cm	50 cm

BASIS-EINZELVENTIL

H965103038011†	20 cm	15 cm
H965103038021	22 cm	17 cm
H965103038031	24 cm	19 cm
H965103038041	28 cm	23 cm
H965103038051	32 cm	27 cm
H965103038061	36 cm	31 cm
H965103038070*	40 cm	35 cm
H965103038080*	48 cm	43 cm
H965103038090*	55 cm	50 cm

Katheterlängenmaß (nicht maßstabsgetreu)

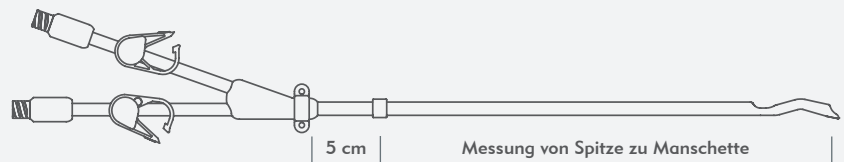

Katalognummer	Kathe- terlänge	Spitze bis Man- schette
---------------	--------------------	----------------------------------

VASCPAK EINZELVENTIL

H965103038161†	20 cm	15 cm
H965103038171†	22 cm	17 cm
H965103038181	24 cm	19 cm
H965103038191	28 cm	23 cm
H965103038201	32 cm	27 cm
H965103038211	36 cm	31 cm
H965103038220*	40 cm	35 cm
H965103038230*	48 cm	43 cm
H965103038240*	55 cm	50 cm

NUR KATHETER

H965103029011†	20 cm	15 cm
H965103029021†	22 cm	17 cm
H965103029031	24 cm	19 cm
H965103029041	28 cm	23 cm
H965103029051	32 cm	27 cm
H965103029061†	36 cm	31 cm
H965103029071†	40 cm	35 cm
H965103029081†	48 cm	43 cm
H965103029091†	55 cm	50 cm

†Dieser Artikel wird auf Bestellung hergestellt | Verpackung:

1 Einheit pro Box. 5 Einheiten pro Karton. | *1 Einheit pro Karton.

DIE KIT-KONFIGURATIONEN UMFASSEN:

BASIS-KIT

- 1–BioFlo DuraMax Hämodialysekatheter
- 2–Injektionskappen
- 1–Selbsthaftender Wundverband
- 1–Abziehbare Einführschleuse mit Ventil, 16 F
- 1–Gefäßdilator, 12 F
- 1–Gefäßdilator, 14 F
- 1–Tri-Ball-Tunneler mit Mantel
- 1–J/Flex Führungsdraht mit 0.038" (0.97 mm)
- 1–Einführnadel, 18 G x 70 mm
- 1–Sicherheitsskalpell, Klinge Nr. 11

VASCPAK™ KIT

- 1–BioFlo DuraMax Hämodialysekatheter
- 2–Injektionskappen
- 1–Selbsthaftender Wundverband
- 1–Abziehbare Einführschleuse mit Ventil, 16 F
- 1–Gefäßdilator, 12 F
- 1–Gefäßdilator, 14 F
- 1–Tri-Ball-Tunneler mit Mantel

KIT NUR MIT KATHETER

- 1–BioFlo DuraMax Hämodialysekatheter
- 2–Injektionskappen

Wenden Sie sich an Ihren Vertreter von Merit Medical, um Informationen zur länderspezifischen Produktverfügbarkeit zu erhalten.

Die Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen für den Gebrauch entnehmen Sie bitte vor der Verwendung der Gebrauchsanweisung.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle
East & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733