

ASAPLP™

Cathéter et kit d'aspiration

ASAP®

Cathéter et kit d'aspiration

Vos solutions pour une
aspiration efficace et
rapide du caillot



PRINCIPALES QUALITÉS DES CATHÉTERS D'ASPIRATION ASAPLP™ ET ASAP®



ASAPLP™



Cathéter et kit d'aspiration

EFFICACE

- Cathéter d'aspiration bas profil de 145 cm avec tresse en 100% acier inoxydable, résistant aux plicatures
- Radio-opacité de l'extrémité améliorée grâce à un marqueur radio-opaque en platine-iridium.
- Lumière d'échange rapide de guide de couleur vive

ASPIRATION RAPIDE

- Aisément compatible avec un cathéter-guide 6F $\geq 0,066''$
- Un cathéter de 4F conçu pour une aspiration maximale
- Long revêtement hydrophile de 30 cm pour une capacité de progression accrue
- Lumière d'échange rapide de 20 cm, plus longue assurant un meilleur suivi du guide

OPTIONS

- Livré avec un stylet de renforcement



ASAP®



Cathéter et kit d'aspiration

EFFICACE

- Cathéter d'aspiration de 140 cm, à extrusion unique, tresse en 100% acier inoxydable, résistant aux plicatures
- Embout éfilé pour une transition douce du cathéter

ASPIRATION RAPIDE

- Grande lumière d'aspiration pour une aspiration rapide
- 3 marqueurs non radio-opaques de positionnement de profondeur à 90, 100 et 110 cm
- Kit tout-en-un avec tous les composants nécessaires pour réaliser une procédure d'aspiration par cathéter

OPTIONS

- Cuvette pour déchets MiniStop® avec couvercle et filtres de 70 microns



LA FACILITÉ AU BOUT DES DOIGTS


Ces deux cathéters sont proposés sous forme de kit ASAP avec tous les composants nécessaires pour effectuer une procédure d'aspiration par cathéter de manière sûre, rapide et efficace. Grâce à notre plateau tout-en-un, il suffit d'enlever le couvercle pour commencer la procédure.

COMPOSANTS DU KIT


- 1) Cathéter d'aspiration ASAPLP ou ASAP à échange rapide et résistant aux plicatures
- 2) Seringues d'aspiration Merit VacLok® 30 mL
- 1) Seringue de rinçage RXP® 4 mL
- 2) Panier-filtres de 70 microns
- 1) Cuvette pour déchets fermée MicroStop™, anti-éclaboussures, capacité liquide de 60 mL
- 1) Tubulure de 21,5 cm avec robinet

UNE SOLUTION RAPIDE ET PRATIQUE

Les kits ASAP sont conçus pour un retrait rapide des embolies et des thrombus frais et souples des vaisseaux du système artériel.

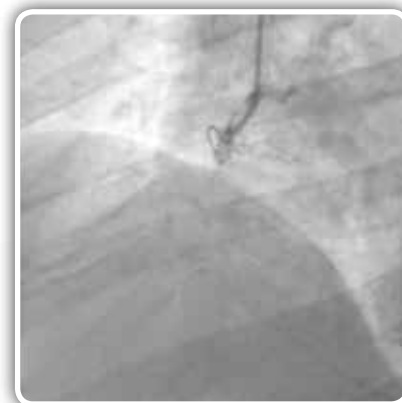

Pré-aspiration


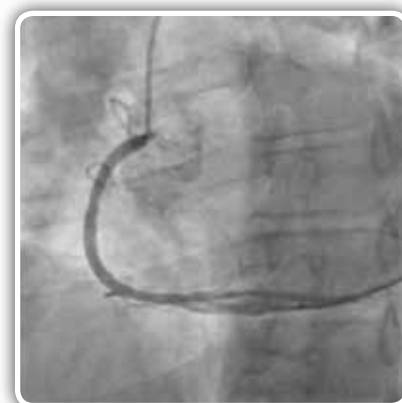


Post-aspiration



ASAP®

Cathéter et kit d'aspiration

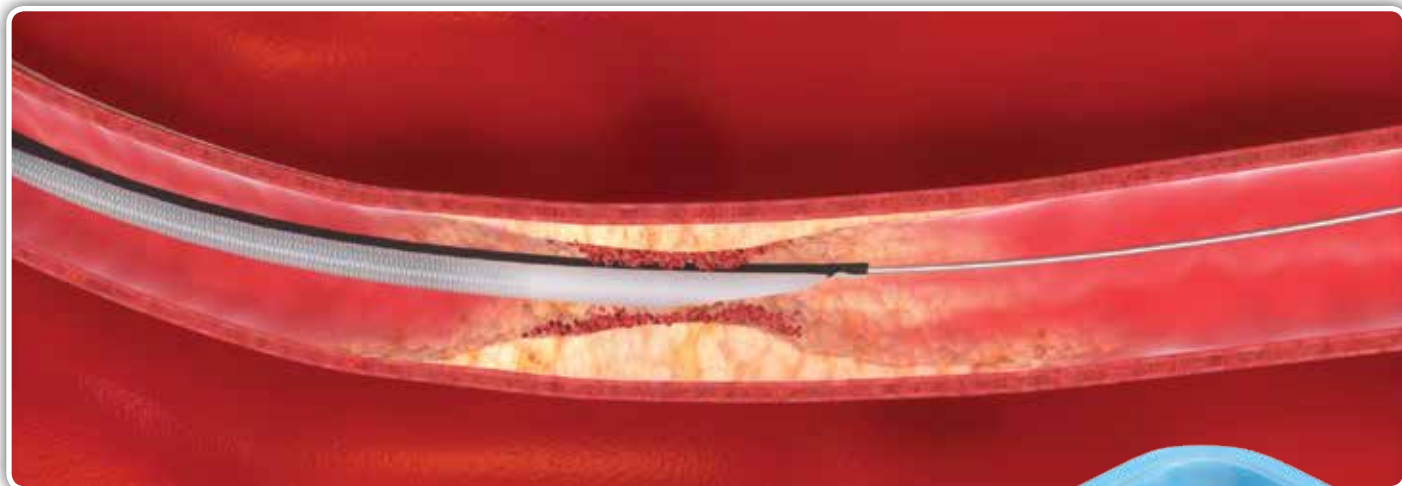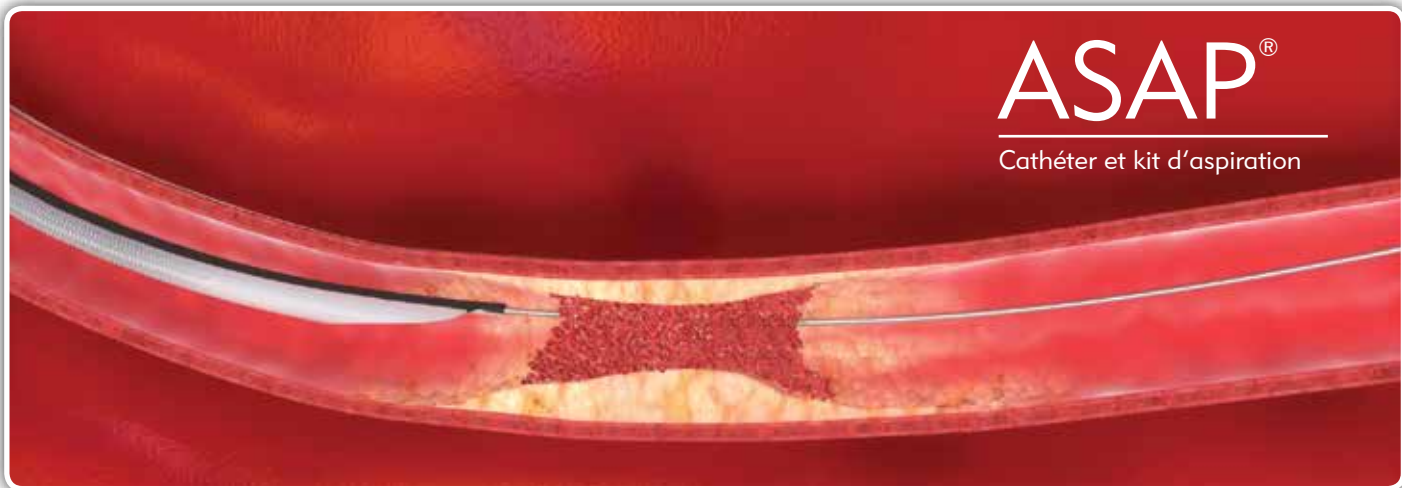

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Description	Conditionnement
ASAP100	Cathéter et kit d'aspiration ASAP	1
ASAPLP	Cathéter et kit d'aspiration ASAPLP	1
MMSF200	Cuvette pour déchets MiniStop avec couvercle et filtre	20



ASAP® / ASAPLP™
Cathéters d'aspiration
MDD 93/42/EEC Classe III
CE 561259 (BSI)
Fabriqués par Merit Medical
Voir instructions d'utilisation
Voir informations de commande

MMSF200



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical France
136 Ave. Joseph Kessel, 78960
Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600 1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 225180252
(Français)
+41 225948000
(Italiano)
+41 225180035
UK
0800 973 115