



PERIPHERAL INTERVENTION

ONE Snare™ EN Snare®

ENDOVASKULÄRES SCHLINGENSYSYSTEM



Genauigkeit.
Zuverlässigkeit.
Optionen™

EN Snare®

ENDO VASKULÄRES SCHLINGENSYSTEM


GENAUIGKEIT

In die Schlingen eingearbeitete Platinstränge verbessern die Sichtbarkeit in der Durchleuchtung und sorgen so für eine effiziente Erfassung von Fremdkörpern.

Drei drehbare, ausfahrbare Schlingen sorgen für die gute Abdeckung des Gefäßquerschnitts und leichtere Erfassung von Objekten an der Seitenwand.

Durch das röntgendichte Markierungsband am Schlingen-Platzierungskatheter lässt er sich präzise lokalisieren.

Die um 15 Grad gebogene Spitze des Schlingen-Platzierungskatheters in den Größen 6 F und 7 F erleichtert die Navigation im Gefäßsystem.

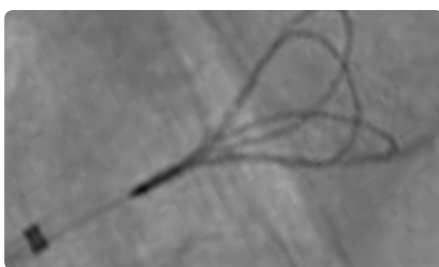

ZUVERLÄSSIGKEIT

Drei ineinander greifende Nitinol-schlaufen geben Halt gegen einen Prolaps während der Navigation im Gefäßsystem.

Der Schlingenkerndraht besteht aus superelastischem Nitinol, das für Flexibilität und Knickresistenz bei der Anwendung sorgt.

Der komfortable Drehgriff überträgt Drehungen im Verhältnis 1:1.



OPTIONEN

Erhältlich in sieben Konfigurationen mit Schlaufendurchmessern zwischen 2 mm und 45 mm.



GENAUIGKEIT

Die vergoldete Wolframschleife mit ihrer hervorragenden Sichtbarkeit in der Durchleuchtung zeigt die tatsächliche Ausrichtung.

Durch das röntgendichte Markierungsband am Schlingen-Platzierungskatheter lässt er sich präzise lokalisieren.

Die um 90 Grad abgewinkelte Schleife macht einen coaxialen Zugang bei der Erfassung von Fremdkörpern möglich.

Der Schlingenkerndraht aus Nitinol kombiniert Memory und superelastische Eigenschaften und bietet so Halt bei der Navigation im Gefäßsystem.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Die Schleife aus Nitinol und vergoldetem Wolfram behält ihre Form und trägt so zur besseren Erfassung von Fremdkörpern bei.

Der Schlingen-Platzierungskatheter besteht aus einem hoch leistungsfähigen Copolymer-Material, das für Festigkeit bei der Rückholung von Fremdkörpern sorgt und das Potenzial für Knicke und Durchbiegungen minimiert.

Der zugentlastende Ansatz des Schlingen-Platzierungskatheters bietet zusätzliche Flexibilität bei der Entfaltung und Anwendung.

Die Einführhilfe mit einem exklusiven Peel-Away-Design ermöglicht ein schnelles und effizientes Laden der Schlinge.

Der komfortable Drehgriff ermöglicht Drehungen der Schlinge.



OPTIONEN

Erhältlich in fünfzehn Kit-Konfigurationen mit zehn Schlaufendurchmessern zwischen 2 mm und 35 mm.



ENSNARE PART NUMBERS

KIT MIT STANDARDSCHLINGE

Katalognummer	Schlaufendurchmesser	Schlingenlänge	Kathetergröße	Katheterlänge
EN2006010	6-10 mm	120 cm	6F	100 cm
EN2006015	9-15 mm	120 cm	6F	100 cm
EN2006020	12-20 mm	120 cm	6F	100 cm
EN2007030	18-30 mm	120 cm	7F	100 cm
EN2007045	27-45 mm	120 cm	7F	100 cm

KIT MIT MINISCHLINGE

EN1003004	2-4 mm	175 cm	3.2F	150 cm
EN1003008	4-8 mm	175 cm	3.2F	150 cm

ONESNARE PART NUMBERS

KIT MIT STANDARDSCHLINGE

Katalognummer	Schlaufendurchmesser	Schlingenlänge	Kathetergröße	Katheterlänge
ONE500	5 mm	120 cm	4F	100 cm
ONE1000	10 mm	120 cm	4F	100 cm
ONE1500	15 mm	120 cm	6F	100 cm
ONE2000	20 mm	120 cm	6F	100 cm
ONE2500	25 mm	120 cm	6F	100 cm
ONE3000	0 mm	120 cm	6F	100 cm
ONE3500	35 mm	120 cm	6F	100 cm

KIT MIT KLEINER SCHLINGE

ONE1001	10 mm	65 cm	4F	48 cm
ONE2501	25 mm	65 cm	6F	48 cm

KIT MIT MINISCHLINGE

ONE200	2 mm	175 cm	2.3-3F	150 cm
ONE201	2 mm	200 cm	2.3-3F	175 cm
ONE400	4 mm	175 cm	2.3-3F	150 cm
ONE401	4 mm	200 cm	2.3-3F	175 cm
ONE700	7 mm	175 cm	2.3-3F	150 cm
ONE701	7 mm	200 cm	2.3-3F	175 cm

ERSATZ-SCHLINGENKATHETER

ONE4000	-	-	4F	100 cm
ONE6000	-	-	6F	100 cm



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (French)

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Sweden
020 792 445

Sweden
020 792 445

Switzerland
00800 9000 5060

UK
0800 973 115