




CARDIAC INTERVENTION

PreludeEASE™

ГИДРОФИЛЬНЫЙ ИНТРОДЬЮСЕР

запатентованная
игла для доступа
Merit Advance®

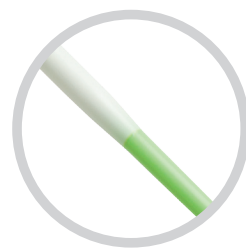

превосходное соединение
интродьюсера и дилататора



Лучевой доступ - это просто

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА

Среди хорошо известных преимуществ лучевого доступа — меньшая кровопотеря, более быстрое восстановление способности пациентов передвигаться и снижение стоимости процедуры. Merit Medical представляет новую линейку **ГИДРОФИЛЬНЫХ** интродьюсеров для лучевого доступа, **PreludeEASE**. Исследования показывают, что использование интродьюсеров с гидрофильным покрытием позволяет снизить вероятность возникновения спазма артерии, уменьшить усилие при введении и извлечении интродьюсера при радиальном доступе.¹

Гидрофильные интродьюсеры PreludeEASE в сочетании с широким ассортиментом изделий, принадлежностей и наборов для радиального доступа по индивидуальному запросу созданы для **ПРОСТОТЫ и УДОБСТВА ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА**.

PreludeEASE™

Гидрофильные интродьюсеры



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА

Интродьюсеры размером 4F–7F


Имеются маленькие размеры для пациентов с малым диаметром лучевой артерии и большие размеры интродьюсеров для диагностических и интервенционных процедур.

Гидрофильное покрытие

Интродьюсер PreludeEASE имеет гидрофильное покрытие до самого кончика. Гидрофильное покрытие облегчает введение и извлечение и способствует большей комфортности процедуры для пациента.²

Безупречные переходы

Легкое и плавное введение способствует большей комфортности процедуры для пациента.

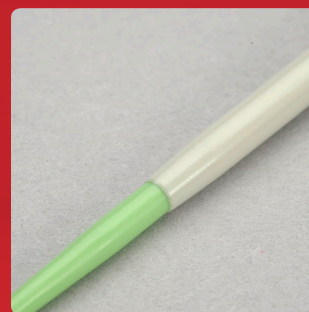

СОСТАВ НАБОРА ДЛЯ ЛУЧЕВОГО ДОСТУПА



Игла Merit Advance®

Короткая игла со скошенным срезом, с указателем направления среза иглы на втулке, а также специальное запатентованное покрытие обеспечивают легкость ввода иглы. Легкость введения и точность прокола уменьшают риск спазма.



Варианты проводников

Имеются проводники с пружинной конструкцией из нержавеющей стали и проводники с нитиноловым сердечником.



BowTie,™ устройство для введения проводника

Включено в наборы с проводниками 0,018" для обеспечения легкой и эффективной осевой ориентации устройств относительно микропроводников

ВАРИАНТЫ НАБОРОВ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ КЛИЕНТА

Merit может комплектовать наборы индивидуально в соответствии с потребностями вашей клинической практики.

¹ Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

² Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and reduces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

³ Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4)

Для каждого этапа процедуры с лучевым доступом Merit Medical предлагает изделия высокого **КАЧЕСТВА**, разработанные специально для Вас. Наш ассортимент **ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ТРАНСРАДИАЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР** - от доступа и до гемостаза - поможет сделать процедуру **ЭФФЕКТИВНОЙ и ЭКОНОМИЧНОЙ**, оказав пациенту **ПОМОЩЬ НА НАИВЫСШЕМ УРОВНЕ**.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

номера по каталогу	FR	ДЛИНА	ДИАМЕТР И ДЛИНА	ТИП ПРО ВОДНИКА	КОМПОНЕНТЫ	ЦВЕТ
PHR4F7018SC	4F	7 cm	0,018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Красный
PHR5F7018SC	5F	7 cm	0,018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Серый
PHR6F7018SC	6F	7 cm	0.018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Зеленый
PHR4F11018SC	4F	11 cm	0.018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Красный
PHR5F11018SC	5F	11 cm	0.018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Серый
PHR6F11018SC	6F	11 cm	0.018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	Зеленый
PHR7F11018SC	7F	11 cm	0.018" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	BowTie	оранжевый
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	0.018" X 40 cm	Серде чник NT/PD (нитинол /палл адий)	BowTie	Красный
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	0,018" X 40 cm	Серде чник NT/PD (нитинол /палл адий)	BowTie	Серый
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	0,018" X 40 cm	Серде чник NT/PD (нитинол /палл адий)	BowTie	Зеленый
PHR4F11021SC	4F	11 cm	0,021" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Красный
PHR5F11021SC	5F	11 cm	0,021" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Серый
PHR6F11021SC	6F	11 cm	0,021" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Зеленый
PHR7F11021SC	7F	11 cm	0,021" X 45 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Оранжевый
PHR4F16021SC	4F	16 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Красный
PHR5F16021SC	5F	16 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Серый
PHR6F16021SC	6F	16 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Зеленый
PHR7F16021SC	7F	16 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Оранжевый
PHR4F23021SC	4F	23 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Красный
PHR5F23021SC	5F	23 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Серый
PHR6F23021SC	6F	23 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Зеленый
PHR7F23021SC	7F	23 cm	0,021" X 80 cm	Пружинный ; пр ямой гибкий кончик	Нет	Оранжевый
PHR6F11035SC	6F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - ГИ БКИЙ И 3 ММJ	Нет	Зеленый
PHR7F11035SC	7F	11 cm	0,035" X 50 cm	SS; DE - ГИ БКИЙ И 3 ММJ	Нет	оранжевый

В состав всех наборов включена игла 21G x 4 см Advance® В лотке; 5 шт. в коробке (0,018" = 0,46 мм 0,021" = 0,53 мм 0,035" = 0,89 мм)



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France Ltd.

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria 0800 295 374	France 0800 91 60 30	Luxembourg 8002 25 22	Sweden 020 792 445
Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (French)	Germany 0800 182 0871	Netherlands 0800 022 81 84	Switzerland 00800 9000 5060
Denmark 80 88 00 24	Ireland (Republic) 1800 553 163	Norway 800 11629	UK 0800 973 115
Finland 0800 770 586	Italy 800 897 005	Sweden 020 792 445	

403043007/A ID 140411