


Osseoflex® SB

catetere a palloncino compatibile con 10 gauge

La famiglia Osseoflex SB di cateteri a palloncino per aumento vertebrale include palloncini orientabili e retti. Il palloncino orientabile Osseoflex SB consente l'accesso all'intero corpo vertebrale con navigazione e precisione impareggiabili. I palloncini SB compatibili con 10 gauge orientabili e retti sono disponibili in formato da 2 ml e 4 ml.

La linea di prodotti Osseoflex SB compatibili con 10 gauge consente il trattamento di fratture vertebrali da compressione. Osseoflex SB può essere usato in configurazioni rette o orientabili. Il palloncino orientabile SB consente la regolazione del movimento in modo da seguire il canale creato dall'ago orientabile Osseoflex SN per la creazione precisa della cavità.

Grazie ad un approccio unipeduncolare o bipeduncolare, Osseoflex SB crea una cavità compattando l'osso spugnoso per il trattamento delle fratture vertebrali da compressione.

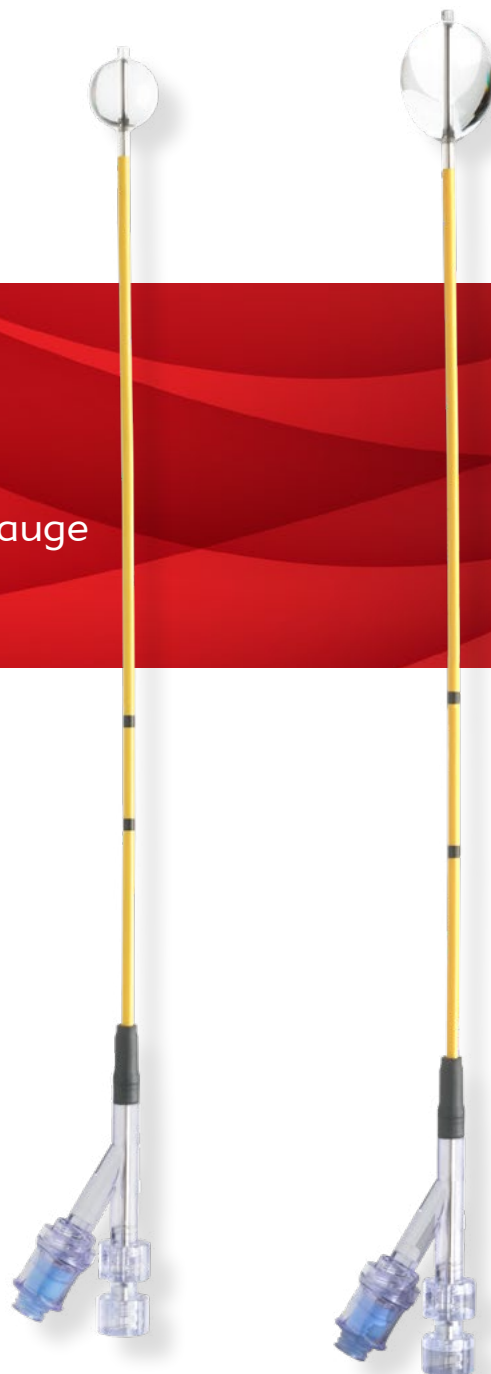

Palloncino retto compatibile con 10 ga/2 ml (OT-0222)

Palloncino retto compatibile con 10 ga/4 ml (OT-0224)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Marker radiopachi indicano le estremità prossimale e distale del palloncino, per il posizionamento accurato prima del gonfiaggio*
- Compatibile con cannula da 10 gauge
- Un marker indicatore sull'asta indica quando la punta del palloncino è posizionata correttamente rispetto all'estremità della cannula*
- Il marker indicatore sull'estremità prossimale dell'asta indica quando il palloncino è completamente inserito e ha superato la cannula*



*Se usato con l'introduttore Osseoflex.

Preferential Path. Targeted Delivery.™

* Percorso preferenziale. Somministrazione mirata.

I palloncini orientabili Osseoflex SB possono creare una cavità centrale attraverso la linea mediana sagittale mediante approccio unipeduncolare.



PALLONCINI OSSEOFLEX SB — COMPATIBILI CON 10 GAUGE

	Codice	Descrizione	Contenuto
ORIENTABILE	OF-0222	Palloncino orientabile Osseoflex SB (10 ga/2 ml)	(1) palloncino orientabile da 2 ml compatibile con 10 gauge
	OF-0224	Palloncino orientabile Osseoflex SB (10 ga/4 ml)	(1) palloncino orientabile da 4ml compatibile con 10 gauge
RETTO	OT-0222	Palloncino retto Osseoflex SB (10 ga/2 ml)	(1) palloncino retto da 2 ml compatibile con 10 gauge
	OT-0224	Palloncino retto Osseoflex SB (10 ga/4 ml)	(1) palloncino retto da 4ml compatibile con 10 gauge
	IN8VCF	Siringa StabiliT Touch™	(1) Dispositivo di gonfiaggio

Come qualsiasi altra procedura chirurgica, esistono dei rischi associati agli interventi di vertebroplastica, cifoplastica e di aumento vertebrale, che possono anche includere delle complicazioni serie. Per informazioni complete relative a rischi, controindicazioni, avvisi, precauzioni ed eventi avversi, consultare le istruzioni per l'uso del sistema.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

merit.com

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Singapore
+65 67536311

South Korea
+8210 2205 0707

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115