



90 %

**D'ACCUMULATION DE
THROMBUS EN MOINS**

PAR RAPPORT AUX CATHÉTERS
SANS REVÊTEMENT
(basé sur la numération
plaquettaire)*




Cathéter d'hémodialyse DuraMax™

Réduction prouvée de l'accumulation de thrombus, in vitro[†]

Le cathéter BioFlo DuraMax™ est le premier cathéter de dialyse doté de la technologie Endexo®, offrant un matériau de cathéter plus résistant à l'accumulation de thrombus in vitro que les cathéters couramment utilisés (sur la base de la numération plaquettaire)[†]

Le cathéter BioFlo DuraMax fournit un accès à long terme au système veineux périphérique pour les séances d'hémodialyse. Le cathéter BioFlo DuraMax intègre la technologie Endexo, présente sur l'ensemble du corps du cathéter, couvrant à la fois les surfaces internes et externes.

- Le cathéter de dialyse BioFlo DuraMax présente 84 % d'accumulation de thrombus en moins sur sa surface in vitro par rapport aux cathéters de dialyse chronique Palindrome sans revêtement (sur la base de la numération plaquettaire).[†]

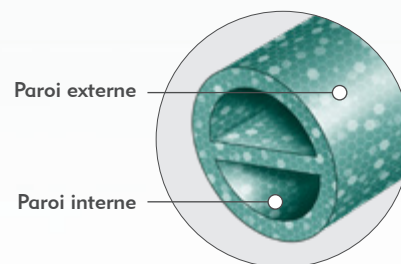

Cathéter BioFlo DuraMax avec technologie Endexo



Le thrombus, la gaine de fibrine ou les caillots visibles sur le cathéter sont minimes.

Image MEB (microscopie électronique à balayage)

Cathéter de dialyse BioFlo DuraMax avec technologie Endexo à grossissement 10x




Cathéter de dialyse chronique Palindrome™ H



Image MEB (microscopie électronique à balayage)

Cathéter de dialyse chronique Palindrome H à grossissement 10x

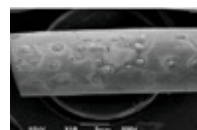

Cathéter BioFlo DuraMax
avec technologie Endexo

83,5 %
D'ACCUMULATION DE
THROMBUS EN MOINS

Par rapport au cathéter de dialyse
chronique Palindrome H
(basé sur la numération
plaquettaire)[†]

[†]La réduction de l'accumulation de thrombus (sur la base de la numération plaquettaire) est étayée par des tests in vitro sur banc réalisés en utilisant du sang bovin pendant deux heures maximum. Les évaluations précliniques in vitro ne prédisent pas nécessairement les performances cliniques en ce qui concerne la formation de thrombus. Données internes.

Cathéter BioFlo DuraMax

Raccords Luer en polyuréthane thermoplastique
allient robustesse, stabilité dimensionnelle et
résistance chimique

Cathéter à
extrémité
courbe

TECHNOLOGIE

**Technologie de cathéter à extrémité
courbe** réduit l'apposition contre la
paroi veineuse et le risque d'insuffisance
artérielle. Un décalage de 3 cm réduit les
taux de recirculation

Cathéter BioFlo DuraMax 15,5 F
facilite des débits élevés à des pressions
artérielles modestes. Lumière exclusive,
conception résistante aux plicatures

**Tubulures d'extension
transparentes** pour une
visualisation précoce du
retour sanguin

**Conception brevetée de
l'extrémité veineuse coudée
et de la lumière pour
fil-guide** positionne le
fil-guide au centre du bord
avant de l'extrémité distale
et offre des performances
sur guides supérieures et une
facilité d'insertion améliorée

Cathéter BioFlo DuraMax

Les caractéristiques avancées du cathéter BioFlo DuraMax, telles que les gros diamètres des lumières et la technologie Endexo de réduction des thrombus, permettent d'obtenir des débits élevés à des pressions modestes.

CATHÉTER BIOFLO
DURAMAX

30,3 %

RÉDUCTION DE LA PRESSION

Par rapport au cathéter de
dialyse chronique
Palindrome™

Offres de kits compétitifs pour les soins aux patients

Les cathéters BioFlo DuraMax sont disponibles en plusieurs options pour une insertion sûre et fiable.

INFORMATIONS DE COMMANDE

Référence	Longueur du cathéter	De l'extrémité au manchon
-----------	----------------------	---------------------------

KIT DE BASE À DOUBLE VALVE

H965103028011†	20 cm	15 cm
H965103028021	22 cm	17 cm
H965103028031	24 cm	19 cm
H965103028041	28 cm	23 cm
H965103028051	32 cm	27 cm
H965103028061	36 cm	31 cm
H965103028070*	40 cm	35 cm
H965103028080*	48 cm	43 cm
H965103028090*	55 cm	50 cm


KIT VASCPAK À DOUBLE VALVE

H965103028161†	20 cm	15 cm
H965103028171†	22 cm	17 cm
H965103028181	24 cm	19 cm
H965103028191	28 cm	23 cm
H965103028201	32 cm	27 cm
H965103028211	36 cm	31 cm
H965103028220*	40 cm	35 cm
H965103028230*	48 cm	43 cm
H965103028240*	55 cm	50 cm

KIT DE BASE À SIMPLE VALVE

H965103038011†	20 cm	15 cm
H965103038021	22 cm	17 cm
H965103038031	24 cm	19 cm
H965103038041	28 cm	23 cm
H965103038051	32 cm	27 cm
H965103038061	36 cm	31 cm
H965103038070*	40 cm	35 cm
H965103038080*	48 cm	43 cm
H965103038090*	55 cm	50 cm

Mesure de la longueur du cathéter (échelle non respectée)

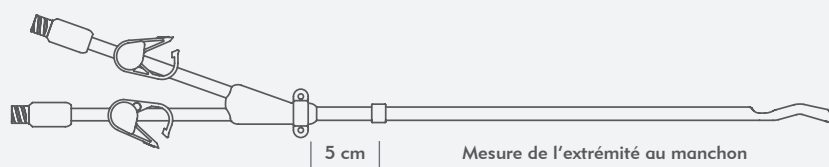

Référence	Longueur du cathéter	De l'extrémité au manchon
-----------	----------------------	---------------------------

KIT VASCPAK À SIMPLE VALVE

H965103038161†	20 cm	15 cm
H965103038171†	22 cm	17 cm
H965103038181	24 cm	19 cm
H965103038191	28 cm	23 cm
H965103038201	32 cm	27 cm
H965103038211	36 cm	31 cm
H965103038220*	40 cm	35 cm
H965103038230*	48 cm	43 cm
H965103038240*	55 cm	50 cm

CATHÉTER UNIQUEMENT

H965103029011†	20 cm	15 cm
H965103029021†	22 cm	17 cm
H965103029031	24 cm	19 cm
H965103029041	28 cm	23 cm
H965103029051	32 cm	27 cm
H965103029061†	36 cm	31 cm
H965103029071†	40 cm	35 cm
H965103029081†	48 cm	43 cm
H965103029091†	55 cm	50 cm

† Cet article est fabriqué sur commande | Conditionnement :
1 unité par boîte. 5 unités par carton. | * 1 unité par carton.

LES CONFIGURATIONS DE KIT COMPRENNENT :

KIT DE BASE

- 1-Cathéter d'hémodialyse BioFlo DuraMax
- 2-Capuchons d'injection
- 1-Pansement adhésif pour plaie
- 1-Gaine d'insertion pelable à valve 16 F
- 1-Dilatateur de vaisseau 12 F
- 1-Dilatateur de vaisseau 14 F
- 1-Tunnelisateur Tri-Ball avec manchon
- 1-Fil-guide J/Flex 0,038" (0.97 mm)
- 1-Aiguille d'introducteur 18 G x 70 mm
- 1-Scalpel à lame de sécurité n° 11

KIT VASCPAK™

- 1-Cathéter d'hémodialyse BioFlo DuraMax
- 2-Capuchons d'injection
- 1-Pansement adhésif pour plaie
- 1-Gaine d'insertion pelable à valve 16 F
- 1-Dilatateur de vaisseau 12 F
- 1-Dilatateur de vaisseau 14 F
- 1-Tunnelisateur Tri-Ball avec manchon

KIT DE CATHÉTER UNIQUEMENT

- 1-Cathéter d'hémodialyse BioFlo DuraMax
- 2-Capuchons d'injection

Pour connaître la disponibilité des produits dans votre pays, consultez votre représentant Merit Medical.

Avant utilisation, se reporter au mode d'emploi pour connaître les indications, contre-indications, avertissements, précautions et consignes d'utilisation.



Comprendre. Innover. Distribuer™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle
East & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE
Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733