



**90%**  
IN MENO  
DI ACCUMULO  
DI TROMBI

RISPETTO AI CATETERI  
NON RIVESTITI  
(in base alla conta piastrinica)\*




Catetere per emodialisi DuraMax™

# Comprovata riduzione dell'accumulo di trombi in vitro<sup>†</sup>

Il catetere BioFlo DuraMax™ è il primo catetere per dialisi dotato della tecnologia Endexo®, realizzato con un materiale più resistente all'accumulo di trombi in vitro rispetto ai cateteri comunemente utilizzati (in base alla conta piastrinica).<sup>†</sup>

Il catetere BioFlo DuraMax consente l'accesso a lungo termine al sistema venoso periferico per le sessioni di emodialisi. L'intero corpo del catetere BioFlo DuraMax, superfici intraluminali ed extraluminali comprese, è realizzato con la tecnologia Endexo.

- Il catetere per dialisi BioFlo DuraMax presenta in vitro un accumulo di trombi ridotto dell'84% sulla superficie rispetto ai cateteri per dialisi cronica Palindrome non rivestiti (in base alla conta piastrinica).<sup>†</sup>

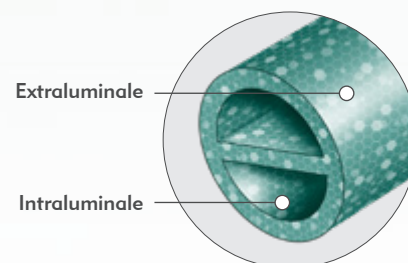

## Catetere per emodialisi BioFlo DuraMax con tecnologia Endexo



Sul catetere sono visibili tracce minime di trombi, guaina di fibrina o coaguli.

**Immagine SEM** (microscopio elettronico a scansione)

Catetere per dialisi BioFlo DuraMax con tecnologia Endexo (ingrandito 10 volte)




## Catetere per dialisi cronica Palindrome™ H



**Immagine SEM** (microscopio elettronico a scansione)

Catetere per dialisi cronica Palindrome H (ingrandito 10 volte)

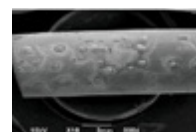

Catetere per emodialisi  
BioFlo DuraMax con  
tecnologia Endexo  
**83,5%**  
**IN MENO DI**  
**ACCUMULO DI TROMBI**

Rispetto al catetere per  
dialisi cronica Palindrome H  
(in base alla conta piastrinica)<sup>†</sup>

<sup>†</sup>La riduzione dell'accumulo di trombi (in base alla conta piastrinica) è supportata da test di laboratorio acuti in vitro su sangue bovino eseguiti fino a due ore dal prelievo. Le valutazioni precliniche in vitro non sono necessariamente predittive delle prestazioni cliniche sulla formazione di trombi. Dati in archivio.

## Catetere BioFlo DuraMax

### Raccordi luer in poliuretano termoplastico:

combinano robustezza, stabilità dimensionale e resistenza chimica

### Curved Tip Catheter

TECHNOLOGY

### Tecnologia a punta curva del catetere:

riduce l'apposizione alla parete venosa e il rischio di insufficienza arteriosa, mentre lo sfalsamento di 3 cm della punta riduce i tassi di ricircolo

### Catetere BioFlo DuraMax da 15,5 F:

consente portate elevate con pressioni arteriose modeste; lume brevettato e design resistente al piegamento

### Tubi di prolunga trasparenti:

permettono una visualizzazione immediata del ritorno di sangue

### Punta venosa angolata e design del lume del filo guida brevettati:

consentono il posizionamento del filo guida al centro del bordo anteriore della punta distale, permettono di operare "over-the-wire" e facilitano l'inserimento

## Catetere BioFlo DuraMax

Caratteristiche avanzate, come l'ampio diametro del lume e la tecnologia di riduzione dei trombi Endexo, consentono al catetere BioFlo DuraMax di erogare portate elevate con pressioni modeste.

CATETERE BIOFLO  
DURAMAX

**30,3%**

**DI PRESSIONE IN MENO**

rispetto al catetere per dialisi  
cronica Palindrome™

## Kit alternativi per la cura dei pazienti

I cateteri BioFlo DuraMax sono disponibili in diverse versioni per un inserimento sicuro e affidabile.

### INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

| Numero di catalogo | Lunghezza catetere | Punta-cuffia |
|--------------------|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------------|--------------|

#### KIT DI BASE A DOPPIA VALVOLA

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>H965103028011†</b> | 20 cm | 15 cm |
| <b>H965103028021</b>  | 22 cm | 17 cm |
| <b>H965103028031</b>  | 24 cm | 19 cm |
| <b>H965103028041</b>  | 28 cm | 23 cm |
| <b>H965103028051</b>  | 32 cm | 27 cm |
| <b>H965103028061</b>  | 36 cm | 31 cm |
| <b>H965103028070*</b> | 40 cm | 35 cm |
| <b>H965103028080*</b> | 48 cm | 43 cm |
| <b>H965103028090*</b> | 55 cm | 50 cm |


#### VASCPAK A DOPPIA VALVOLA

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>H965103028161†</b> | 20 cm | 15 cm |
| <b>H965103028171†</b> | 22 cm | 17 cm |
| <b>H965103028181</b>  | 24 cm | 19 cm |
| <b>H965103028191</b>  | 28 cm | 23 cm |
| <b>H965103028201</b>  | 32 cm | 27 cm |
| <b>H965103028211</b>  | 36 cm | 31 cm |
| <b>H965103028220*</b> | 40 cm | 35 cm |
| <b>H965103028230*</b> | 48 cm | 43 cm |
| <b>H965103028240*</b> | 55 cm | 50 cm |

#### VERSIONE BASE A VALVOLA SINGOLA

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>H965103038011†</b> | 20 cm | 15 cm |
| <b>H965103038021</b>  | 22 cm | 17 cm |
| <b>H965103038031</b>  | 24 cm | 19 cm |
| <b>H965103038041</b>  | 28 cm | 23 cm |
| <b>H965103038051</b>  | 32 cm | 27 cm |
| <b>H965103038061</b>  | 36 cm | 31 cm |
| <b>H965103038070*</b> | 40 cm | 35 cm |
| <b>H965103038080*</b> | 48 cm | 43 cm |
| <b>H965103038090*</b> | 55 cm | 50 cm |

#### Misurazione della lunghezza del catetere (non in scala)

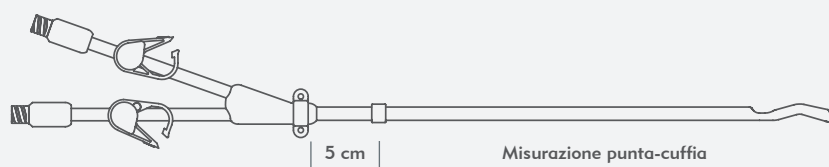

| Numero di catalogo | Lunghezza catetere | Punta-cuffia |
|--------------------|--------------------|--------------|
|--------------------|--------------------|--------------|

#### VASCPAK A VALVOLA SINGOLA

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>H965103038161†</b> | 20 cm | 15 cm |
| <b>H965103038171†</b> | 22 cm | 17 cm |
| <b>H965103038181</b>  | 24 cm | 19 cm |
| <b>H965103038191</b>  | 28 cm | 23 cm |
| <b>H965103038201</b>  | 32 cm | 27 cm |
| <b>H965103038211</b>  | 36 cm | 31 cm |
| <b>H965103038220*</b> | 40 cm | 35 cm |
| <b>H965103038230*</b> | 48 cm | 43 cm |
| <b>H965103038240*</b> | 55 cm | 50 cm |

#### SOLO CATETERE

|                       |       |       |
|-----------------------|-------|-------|
| <b>H965103029011†</b> | 20 cm | 15 cm |
| <b>H965103029021†</b> | 22 cm | 17 cm |
| <b>H965103029031</b>  | 24 cm | 19 cm |
| <b>H965103029041</b>  | 28 cm | 23 cm |
| <b>H965103029051</b>  | 32 cm | 27 cm |
| <b>H965103029061†</b> | 36 cm | 31 cm |
| <b>H965103029071†</b> | 40 cm | 35 cm |
| <b>H965103029081†</b> | 48 cm | 43 cm |
| <b>H965103029091†</b> | 55 cm | 50 cm |

†Questo articolo viene realizzato su ordinazione | 1 unità per confezione. 5 unità per scatola. | \*1 unità per scatola.

### CONFIGURAZIONI DEL KIT:

#### KIT DI BASE

- 1 catetere per emodialisi BioFlo DuraMax
- 2 tappi per iniezione
- 1 medicazione adesiva per ferite
- 1 guaina di introduzione pelabile valvolata da 16 F
- 1 dilatatore vascolare da 12 F
- 1 dilatatore vascolare da 14 F
- 1 tunnellizzatore trisferico con manicotto
- 1 filo guida con punta flessibile a J da 0.038" (0.97 mm)
- 1 ago introduttore da 18 G x 70 mm
- 1 bisturi con coprilama di sicurezza n. 11

#### KIT VASCPAK™

- 1 catetere per emodialisi BioFlo DuraMax
- 2 tappi per iniezione
- 1 medicazione adesiva per ferite
- 1 guaina di introduzione pelabile valvolata da 16 F
- 1 dilatatore vascolare da 12 F
- 1 dilatatore vascolare da 14 F
- 1 tunnellizzatore trisferico con manicotto

#### KIT SOLO CATETERE

- 1 catetere per emodialisi BioFlo DuraMax
- 2 tappi per iniezione

Consultare il rappresentante Merit Medical di zona per la disponibilità dei prodotti nei singoli Paesi.

Prima dell'uso, consultare le Istruzioni per l'uso per le indicazioni, controindicazioni, avvertenze, precauzioni e linee guida.



Understand. Innovate. Deliver.™

merit.com

Merit Medical Systems, Inc.  
1600 West Merit Parkway  
South Jordan, Utah 84095  
1.801.253.1600  
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle  
East & Africa (EMEA)  
Amerikalaan 42, 6199 AE  
Maastricht-Airport  
The Netherlands  
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.  
Parkmore Business Park West  
Galway, Ireland  
+353 (0) 91 703 733