

InQwire® Amplatz

Guía

**INNOVACIÓN EN
EL DELICADO ARTE
DE LA NAVEGACIÓN**

NUEVO




LA BASE DEL RENDIMIENTO

Diseño de eje rígido

- Bobina exterior de alambre plana que permite crear un núcleo interno más amplio para ofrecer más soporte del eje
- Mayor rigidez que ofrece estabilidad dentro de la vasculatura para mejorar la navegación
- Empuje y navegación sin limitar la flexibilidad de la punta

Compatibilidad

Compatible con Dispositivos de 0,035" y 0,038"

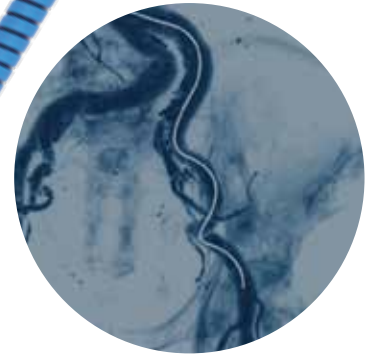

GRAN RADIOPACIDAD

Soporte de colocación de dispositivos

- Recubrimiento de teflón patentado que reduce la fricción en toda la guía
- Mayor rigidez que proporciona más soporte para facilitar el avance de dispositivos como catéteres de dilatación, catéteres de stent y otros dispositivos percutáneos
- Proporciona más soporte y estabilidad durante la colocación y el intercambio del catéter durante el acceso contralateral

Diseño de punta atraumática

La suave transición que se va estrechando desde el eje hasta la punta flexible permite un procedimiento atraumático de la anatomía más difícil





Varias configuraciones de la punta


Guías de punta recta en una variedad de perfiles flexibles, entre ellos, de 1,0 cm, 3,5 cm, 4,0 cm, 6 cm y 7 cm. Configuración de punta en J de 3 mm también disponible

Lubricación mejorada

El recubrimiento de teflón patentado ofrece una lubricación mejorada en toda la superficie de la guía, por lo que garantiza una manipulación suave por toda la vasculatura



Comparación de lubricación entre Merit Amplatz y el competidor principal¹

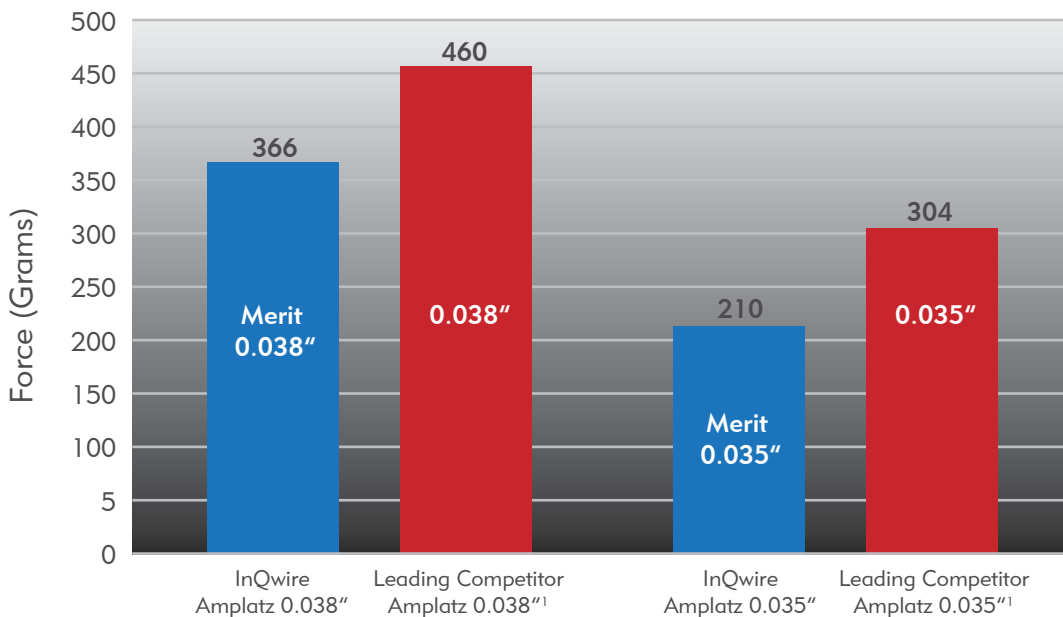

Una fuerza menor (gramos) significa una guía más lubricada, con lo que se mejora la navegación de la guía por la vasculatura. La lubricación mejorada permite que los catéteres se muevan más fácilmente por la guía.


Una fuerza mayor (gramos) significa una mayor sensación de resistencia durante la manipulación de la guía y del catéter en la vasculatura.

Merit Amplatz proporciona un 20 % más de lubricación que el competidor principal.¹

¹ Datos en archivo. Merit no se responsabiliza de actualizar los datos de prueba.

Número de catálogo	Diámetro	Longitud	Longitud punta flexible	Descripción
IQA513	0,035" (0,89 mm)	75 cm (29")	1,0 cm	Punta corta y recta
IQA511	0,035" (0,89 mm)	180 cm (71")	1,0 cm	Punta corta y recta
IQA512	0,038" (0,97 mm)	180 cm (71")	1,0 cm	Punta corta y recta
IQA509	0,035" (0,89 mm)	260 cm (102")	1,0 cm	Punta corta y recta
IQA510	0,038" (0,97 mm)	260 cm (102")	1,0 cm	Punta corta y recta
IQA527	0,035" (0,89 mm)	145 cm (57")	3,5 cm	Punta corta y recta
IQA528	0,038" (0,97 mm)	145 cm (57")	3,5 cm	Punta corta y recta
IQA521	0,035" (0,89 mm)	75 cm (29")	4,0 cm	Punta corta y recta
IQA524	0,035" (0,89 mm)	145 cm (57")	4,0 cm	Punta corta y recta
IQA518	0,038" (0,97 mm)	145 cm (57")	4,0 cm	Punta corta y recta
IQA522	0,035" (0,89 mm)	180 cm (71")	4,0 cm	Punta corta y recta
IQA564	0,038" (0,97 mm)	75 cm (29")	6,0 cm	Recta
IQA517	0,038" (0,97 mm)	145 cm (57")	6,0 cm	Recta
IQA519	0,038" (0,97 mm)	180 cm (71")	6,0 cm	Recta
IQA520	0,038" (0,97 mm)	260 cm (102")	6,0 cm	Recta
IQA563	0,035" (0,89 mm)	75 cm (29")	7,0 cm	Recta
IQA523	0,035" (0,89 mm)	145 cm (57")	7,0 cm	Recta
IQA525	0,035" (0,89 mm)	180 cm (71")	7,0 cm	Recta
IQA526	0,035" (0,89 mm)	260 cm (102")	7,0 cm	Recta
IQA500	0,035" (0,89 mm)	145 cm (57")	J 3,0 mm	3mm J
IQA501	0,035" (0,89 mm)	180 cm (71")	J 3,0 mm	3mm J
IQA502	0,035" (0,89 mm)	260 cm (102")	J 3,0 mm	3mm J
IQA503	0,038" (0,97 mm)	145 cm (57")	J 3,0 mm	3mm J
IQA504	0,038" (0,97 mm)	180 cm (71")	J 3,0 mm	3mm J

DETALLE DE LAS PUNTAS DE AMPLATZ

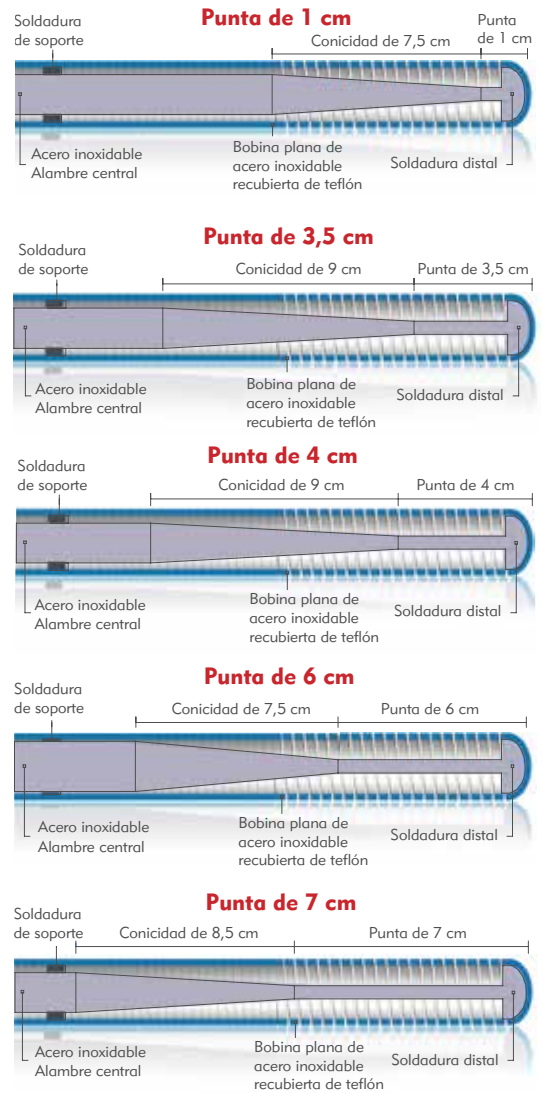

Para proteger la propiedad intelectual, estos diagramas son simbólicos y no son representaciones específicas de ingeniería. El diseño de la guía difiere entre los tamaños del producto. El diagrama no está a escala

Antes de utilizarlas, consulte las instrucciones de uso para conocer las indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones y el modo de empleo.



Understand. Innovate. Deliver.™

Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
South Jordan, Utah 84095
1.801.253.1600
1.800.35.MERIT

Merit Medical Europe, Middle East, & Africa (EMEA)
Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.
Parkmore Business Park West
Galway, Ireland
+353 (0) 91 703 733

merit.com

Australia
+61 (0) 3 8373 4943

Austria
0800 295 374

Belgium
0800 72 906 (Dutch)
0800 73 172 (Français)

Brazil
+55 11 4561 - 0062

Canada
1.800.364.4370

China
+86-10 8561 0788

Denmark
80 88 00 24

Finland
0800 770 586

France
0800 91 60 30

Germany
0800 182 0871

Hong Kong
+852-2207 6888

India
+91-80-41223376

Ireland (Republic)
1800 553 163

Italy
800 897 005

Luxembourg
8002 25 22

Netherlands
0800 022 81 84

Norway
800 11629

Portugal
308 801 034

Russia
+7 495 221 89 02

Singapore
+65 67536311

South Korea
+8210 2205 0707

Spain
+34 911238406

Sweden
020 792 445

Switzerland
(Deutsch)
+41 22 518 02 30

(Français)
+41 22 518 02 52

(Italiano)
+41 22 518 00 35

UK
0800 973 115